

Instrucciones de uso




Audífonos Retroauriculares



A&M Hearing

Audífonos retroauriculares

Manual del usuario

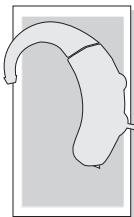

Esta Guía rápida del manual del usuario describe cómo utilizar los audífonos rápida y fácilmente.

También ofrece información importante sobre la manipulación de los audífonos y de las baterías.

Su audioprotesista puede responder las demás preguntas que tenga en cuanto al manejo y uso correcto del audífono.

Notas de seguridad sobre las baterías

ADVERTENCIA.

Peligro de asfixia debido a piezas pequeñas.

- Mantenga los audífonos fuera del alcance de los niños.
- Si se tragan, consulte con un médico o vaya a un hospital inmediatamente.
- Si bebés, niños o personas con deficiencias mentales necesitan llevar audífonos, supervíselos adecuadamente.

PRECAUCIÓN.


Si las baterías tienen fugas, se puede dañar el audífono.

Si no va a utilizar el audífono durante mucho tiempo, retire las baterías.

NOTA.

No arroje las baterías usadas a la basura doméstica. Elimínelas según las directivas nacionales o devuélvalas al audioprotesista.


Colocar o cambiar la batería

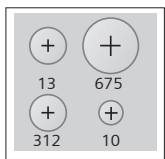

Tipo de batería
tamaño original

NOTA.

En algunos audífonos el volumen del sonido puede disminuir o puede que oiga usted sonidos complementarios cuando la carga de la batería esté baja. En ese caso, cambie la batería.

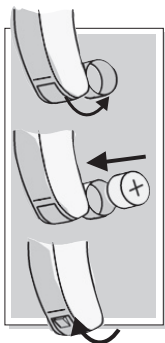

Abra el compartimento
de la batería.

Coloque la batería.
Asegúrese de que coincidan
los símbolos de la batería y
del compartimento.

Cierre el compartimento
de la batería.

Bloqueo del portapila

DISPONIBLE EN DETERMINADOS MODELOS




Para cerrar o abrir, desplace la tapa corrediza con un objeto puntiagudo adecuado.

desbloquear




bloquear

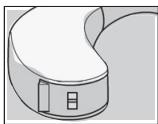

O BIEN

Para cerrar o abrir, desplace la tapa corrediza con un objeto o puntiagudo adecuado. Abra parcialmente el compartimento de la batería.

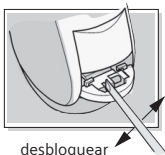


bloquear


desbloquear

O BIEN


Tapa separada para bloquear el interruptor ON/OFF y el compartimento de la batería.

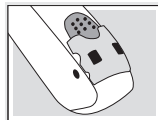


Conectar y desconectar el audífono

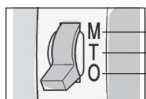

- Con.
- Funciones especiales
- Apagado

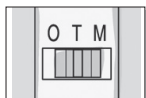


- O BIEN
- Algunos audífonos tienen un botón de programa horizontal

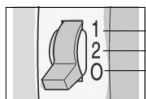

- O BIEN
- 1° programa auditivo (conexión)
 - 2° programa auditivo
 - Apagado


Conectar y desconectar el audífono

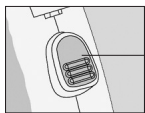

O BIEN

Botón de programa:

Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos

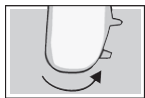

O BIEN

Conectar:

Cerrar el compartimento de la batería



Desconectar:


Abra parcialmente el compartimento de la batería



O BIEN

CONEXIÓN


En ON el compartimento de pilas está cerrado

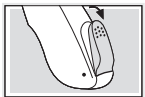

DESCONEXIÓN


En OFF el compartimento de pilas está abierto

Regulación del volumen

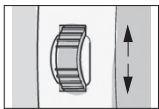

Más volumen:
gire la rueda hacia arriba


Menos volumen:
gire la rueda hacia abajo

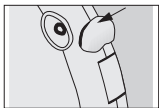

O BIEN

Más volumen:
empuje hacia arriba

Menos volumen:
empuje hacia abajo

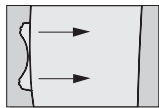

O BIEN

Más volumen:
empuje hacia arriba

Menos volumen:
empuje hacia abajo

IMPORTANTE


Si se manejan incorrectamente, los audífonos de alta amplificación pueden producir daños auditivos permanentes. Consulte con el especialista en audífonos.

NOTA

¡En los audífonos con regulación automática del volumen se ajusta el volumen automáticamente durante el funcionamiento!


Selección del programa auditivo

DISPONIBLE EN DETERMINADOS MODELOS

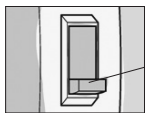



Así

Para cambiar el programa:
bascule el conmutador

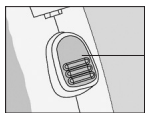


O BIEN

Pulse el
botón

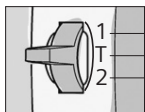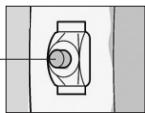

O BIEN

1° programa auditivo
Bobina telefónica
2° programa auditivo

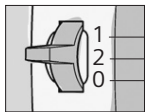

O BIEN

1° programa auditivo
2° programa auditivo
Cambie la posición del
conmutador basculante


Conectar accesorios a la entrada de audio

DISPONIBLE EN DETERMINADOS MODELOS

Con determinados audífonos puede conectar accesorios por medio de la zapata de audio. Para más detalles pregunte a su especialista en audífonos.

ADVERTENCIA.

¡Peligro de descarga eléctrica! Conecte la entrada de audio sólo a dispositivos alimentados por la red que cumplan las normas de seguridad IEC 60065.

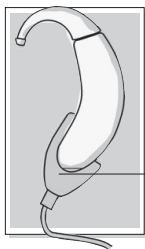


Disponible en determinados modelos

Zapata de audio


Adaptador de audio

DISPONIBLE EN DETERMINADOS MODELOS

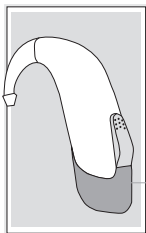

El terminal de audio está integrado en el compartimento de la batería. El cambio deberá ser realizado por un especialista en aparatos auditivos.

Productos OPEN

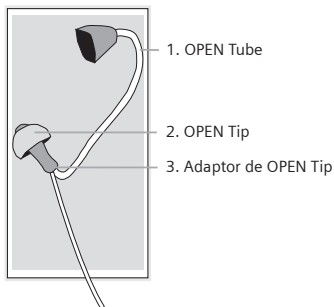

Nota:

- Utilice siempre el OPEN Tube con el OPEN Tip.
- Asegúrese de que el OPEN Tip esté completamente acoplado al adaptador OPEN Tip.
- Cambie el OPEN Tube o el OPEN Tip si se agrietan.
- Coloque con cuidado el OPEN Tube con el OPEN Tip, y no lo introduzca demasiado en el oído.
- Utilice el OPEN Tube y el OPEN Tip exclusivamente de la forma indicada en este manual del operador.

Notas generales sobre seguridad

ATENCIÓN.

Proteja el audífono de los líquidos, la humedad, el sobrecalentamiento y los daños físicos.

ATENCIÓN.

Quítese el audífono antes de:

- la ducha, el baño o el uso de lacas en aerosol
- el contacto con intensos campos magnéticos (p. ej. dispositivos médicos)
- un examen con rayos X

ADVERTENCIA.

¡No utilice el audífono en zonas donde exista peligro de explosión!

Si falla el audífono

- ¿Está conectado el audífono?
- ¿Está insertada correctamente la batería?
- ¿Está agotada la batería?
- ¿Está bien cerrado el compartimento de la batería?
- ¿Está a cero el mando del volumen?
- ¿Está obstruido con cera el molde auricular?

NOTA SOBRE EL MANTENIMIENTO.

Limpie el molde auricular con regularidad para evitar que se acumule cera. Su audioprotesista le asesora en lo referente a todas las demás preguntas relacionadas con la limpieza de su audífono personal.

Información sobre la eliminación!

En la Unión Europea, el equipo marcado esta cubierto por la "Directiva 2002/96/EC del Parlamento europeo y del Consejo del 27 de enero de 2003 sobre eliminación de equipos eléctricos y electrónicos. Enmendada por la Directiva 2003/108/EC" (WEEE).



Recicle el audífono según las directivas nacionales.

www.hearing-am.com

Con la marca CE, Siemens confirma la conformidad con la Directiva Europea 93/42/EEC de productos sanitarios.



Sujeto a cambio sin previo aviso.

Siemens
Audiologische Technik GmbH
Gebbertstraße 125
D-91058 Erlangen
Germany

A&M es una marca de
Siemens Audiologische Technik GmbH
www.hearing-am.com